


lentiCRISPR-V2质粒说明书

【质粒信息】

产品货号	GC010100605		
产品名称	lentiCRISPR-V2		
产品规格	☒ 小提 (≥2ug)	☐ 中提 (≥35ug)	☐ 大提 (≥500ug)
原核抗性	Amp		
真核抗性	BleoR		
荧光标记	无		
高/低拷贝	高		
培养温度	37°C		
感受态	DH5a		

【质粒图谱】

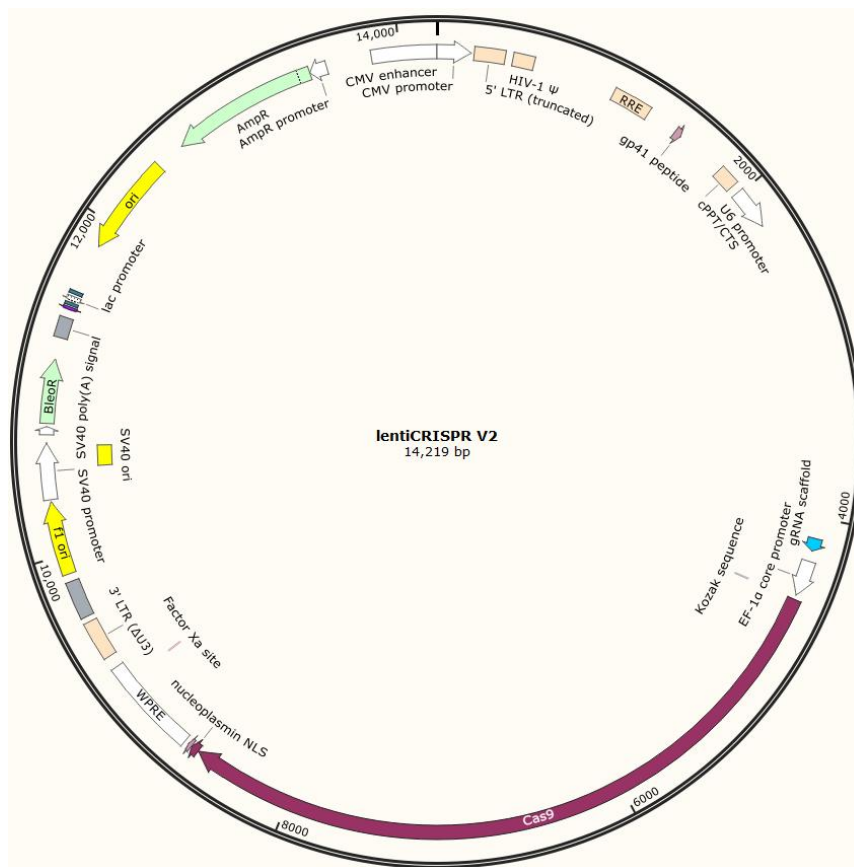

[基因修饰细胞（敲除、敲入、点突变）](#) [基础实验服务（动物实验、载体构建）](#)

[病毒包装（慢病毒、非整合慢病毒、腺病毒、腺相关病毒、病毒样颗粒蛋白、脂质体纳米颗粒）](#)

[试剂（常规试剂、感受态、基因敲除敲入点突变试剂盒、滴度检测试剂盒）](#)

【保存与扩增】

- 1.保存：质粒置于-20℃保存，穿刺菌置于4℃保存
- 2.质粒扩增：收到质粒后离心，-80℃取出感受态细胞，取1uL质粒加至100ul感受态中，冰浴30min；42℃热击90s，再冰浴2min，混合液体直接涂板，倒置培养12-16h，挑单克隆至液体培养基中，震荡12-16h，提取质粒。
- 3.菌液扩增：经划线培养后挑克隆至相应抗性LB培养基中。

【注意事项】

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

【使用说明】

首次使用2μg包装的本产品时，请先取少量本质粒转化大肠杆菌，进行质粒小量、中量或大量抽提后再用于后续用途。
抽提获得的质粒可以通过酶切电泳进行鉴定，或通过测序进行鉴定。

【质粒序列】

tgatgcggttttggcagttacatcaatgggcgtggatagcgggttgactcacggggatttccaagtcctccacccattgacgtcaatg
ggagtttgttttggcaccaaaatcaacgggactttccaaaatgtcgttaacaactccgccccattgacgcaaatgggcggtaggcgtg
tacggtgggaggtctatataagcagcgcgttttgcctgtactgggtctctctggttagaccagatctgagcctgggagctctctggc
taactaggaacccactgcttaagcctcaataaagcttgcccttgagtgttcaagtagtgtgtgccgctctgttgtgtgactcttgt
aactagagatccctcagacccttttagtcagtgtggaaaatctctagcagtggcgcccgaacagggacttgaaagcgaaagggaaac
cagaggagctctctcgacgcaggactcggccttgctgaagcgcgcacggcaagaggcgagggcgggcgactggtgagtacgcaaaaa
ttttgactagcggaggctagaaggagagagatgggtgagagcgtcagtattaagcgggggagaattagatcgcgatgggaaaaaa
ttcggtttaagccagggggaaagaaaaaataaaacatatagtagtgaggcaagcaggagctagaacgattcgcagttaatc
ctggcctgttagaaacatcagaagcgtgtagacaaatactgggacagctacaaccatcccttcagacaggatcagaagaacttagat
cattatataatacagtagcaaccctctattgtgtgcatcaaaggatagagataaaagacaccaaggaagcttttagacaagatagagg
aagagcaaaacaaaagtaagaccaccgcacagcaagcgccgctgatcttcagacctggaggaggagatatgagggacaattggaga
agtgaattatataaaatataaagtagtaaaaattgaaccattaggagtagcaccaccaaggcaaagagaagagtggtgcagagagaa
aaaagagcagtggaataggagctttgttccttgggttcttgggagcagcaggaagcactatgggcgcagcgtcaatgacgtgacg
gtacaggccagacaattattgtctggtatagtcagcagcagaacaatttgcctgagggctattgaggcgcaacagcatctgttgcaa
ctcacagctctggggcatcaagcagctccaggcaagaatcctggctgtggaaagatacctaaggaatcaacagctcctggggatttgg
ggttgctctggaaaactcatttgcaccactgctgtgcttggaaatgctagtggagtaataaatctctggaacagatttggaaatcac
acgacctggatggagtgggacagagaaattaacaattacacaagcttaatacactccttaattgaagaatcgcaaaaccagcaagaa
agaatgaacaagaattattggaattagataaatgggcaagtttgtggaattgggttaacataacaaattggctgtggtatataaaa
ttattcataatgatagtaggagccttggttaggtttaagaatagtttttgcctgtactttctatagtgaaatagagtttaggcagggat

[基因修饰细胞（敲除、敲入、点突变）](#) [基础实验服务（动物实验、载体构建）](#)

[病毒包装（慢病毒、非整合慢病毒、腺病毒、腺相关病毒、病毒样颗粒蛋白、脂质体纳米颗粒）](#)

[试剂（常规试剂、感受态、基因敲除敲入点突变试剂盒、滴度检测试剂盒）](#)



tcaccattatcgtttcagaccacctcccaacccccgaggggacccgacaggcccgaaggaatagaagaagaaggtggagagagagac
agagacagatccattcgatttagtgaacggatcggcactgcgtgcgccaattctgcagacaaatggcagttatcatccacaatttttaa
aagaaaaggggggattgggggtacagtgcaggggaaagaatagtagacataatagcaacagacatacaaaactaaagaattacaaaa
acaaattacaaaaattcaaaattttcgggtttattacagggacagcagagatccagtttggttaattaaggtaccgagggcctattt
cccatgattccctcatatttgcataatacagatacaaggctgttagagagataattagaattaatttgactgtaaacacaaagatatta
gtacaaaatcgtgacgtagaaagtaataattttcttgggtagtttgcagttttaaaattatgttttaaatggactatcatatgctt
accgtaacttgaaagtatttcgattttcttggctttatatacttgttgaaaggacgaaacaccggagacggttgtaaatgagcacac
aaaatacacatgctaaaatattatattctatgacctttataaaatcaacaaaaatcttctttttaataacttttagtatcaataatta
gaatttttatgttcccttttgcacaaacttttaataaaaaatgagcaaaaataaaaaaacgctagtttttagtaactcgcgttggtttcttc
acctttaataatagctactccaccacttgttccaaagcgtcagctcctgcttcaatcatttttgagcatcttcaaatgttctaac
tccaccagctgctttaactaaagcattgtctttaacaactgacttcatttagtttaacatcttcaaatgttgcacctgattttgaaaa
tctgttgatgttttaacaaattctaataccagcttcaacagctatttcacaagctttcatgatttcttcttttgtaataaacaatt
ttccataatacatttaacaacatgtgatccagctgcttttttacagctttcatgtcttctaaaactaattcataatttttgtcttt
taatgcaccaatatttaataccatatcaatttctgttgcaccatctttaattgcttcagaaacttcgaatgcttttgtagctgttgt
gcatgcacctagaggaaaacctacaacatttgttattcctacatttgtgccttttaataattctttacaatagcttgttcaatatga
attaacacaaactgttgcaaaatcaaatcaattgcttcatcacataattgtttaatttcagcttctgtagcatcttgttttaataa
tgtgtgatctatataatttgttttagtttcattttttctctatatattcatttttaattttaattcttttaataatttcgtctacttta
acttttagcgttttgaacagattcaccaacacctataaaaataaatttttagtttaggttcagttccacttgggcgaacagcaaatcat
gacttatcttctaaataaaatttttagtaagctcttgcctggcatattatacattccatcgatgtagtcttcaacattaacaacttta
agtccagcaatttgagttaagggtgttgcctcaatgatttcattaatgggtcaatttttaatttcttttcttctgtgtttaaaattc
aagtttaagtgaagtgtaatatgcaccatttcttttaataaaatcttctaaatagtctactaatgttttattttgtttttataa
aatcaagcagcctctgctattaatatagaagcttgattccatctttatctctagctgagtcacatcaattacatatccataactttct
tcataagcaaaaacaaaatttaataccgttatcttcttcttttagcaatttctctaccattcatttaaatccagttaaagtttttaca
atattaactccatatttttcatgagcgattctatcacccaaatcacttgttacaaaacttgaatatagagccggattttttggaatg
ctatttaagcgttttagatttgataattttcaatcaattaaaatttggtcctgtttgatttccatctaatttacaacaaatgaccatca
tgttttatgtccattccaaatctgtcagcatctgggtcattcataataataatatctgcatcatgtttaataccatatccaagcgggt
atttttcatgcaggatcaaatcttgatttggatttacaacatttttaaatgtttcatcttcaaatgcatgctcttcaacctcaata
acgttatatcctgattcacgtaataattttggggtaaattttagttcctgttccattaaactgcgctaaaaataatttttaaatctttt
ttagcttcttgccttttttgtacgtctctgttttagagctagaaatagcaagttaaaataaggctagtcggttatcaacttgaaaa
agtggcaccgagtcggtgctttttgaattcgttagcttaggtcttgaaaggagtggaattggctccggtgcccgtcagtgggcaga
gcgcacatcggccacagtcggcgagaagttggggggaggggtcggcaattgatccggtgcctagagaaggtggcgcggggtaaactg
ggaaagtgatgtcgtgtactggctccgcctttttcccgaggggtgggggagaaccgtatataagtgcagtagtcgccgtgaacgttct
ttttcgaacgggtttgccgcgagaacacaggaccggttctagagcgtgccaccatggacaagaagtacagcatcgccctggacat
cggcaccaactctgtgggctgggcccgtgatcacgacgagtacaaggtgccagcaagaaattcaaggtgctgggcaacaccgaccg
gcacagcatcaagaagaacctgatcggagccctgctgttcgacagcggcgaaacagccgaggccacccggctgaagagaaccgccag
aagaagatacaccagacggaagaaccggatctgctatctgcaagagatcttcagcaacagatggccaaggtggacgacagcttctt
ccacagactggaagagtcttctcgttgggaagaggataagaagcacgagcggcaccatcttccgcaacatcgtggacgaggtggc
ctaccacgagaagtacccaccatctaccacctgagaaagaaactggtggacagcaccgacaaggccgacctgcggtgatctatct
ggccctggcccacatgatcaagttccggggccacttctgatcgagggcgacctgaaccccgacaacagcgacgtggacaagctgtt
catccagctggtgcagacctacaaccagctgttcgagggaaaaccccatcaacgccagcggcgtggacgccaaggccatcctgtctgc
cagactgagcaagagcagacggctggaaaatctgatcgccagctgcccggcgagaagaagaatggcctgttcggaacctgattgc

[基因修饰细胞（敲除、敲入、点突变）](#) [基础实验服务（动物实验、载体构建）](#)

[病毒包装（慢病毒、非整合慢病毒、腺病毒、腺相关病毒、病毒样颗粒蛋白、脂质体纳米颗粒）](#)

[试剂（常规试剂、感受态、基因敲除敲入点突变试剂盒、滴度检测试剂盒）](#)



cctgagcctgggcctgacccccaaacttcaagagcaacttcgacctggccgaggatgccaaactgcagctgagcaaggacacctacga
cgacgacctggacaacctgctggccagatcggcgaccagtacgccgacctgtttctggccgccaagaacctgtccgacgccatcct
gctgagcgacatcctgagagtgaacaccgagatcaccaaggccccctgagcgcccttatgatcaagagatacgacgagcaccacca
ggacctgacctgctgaaagctctcgtgcggcagcagctgcctgagaagtacaaagagattttcttcgaccagagcaagaacggcta
cgccggctacattgacggcggagccagccaggaagagtctacaagttcatcaagcccatcctggaaaagatggacggcaccgagga
actgctcgtgaagctgaacagagaggacctgctgcggaagcagcggaccttcgacaacggcagcatccccaccagatccacctggg
agagctgcacgccattctgcggcggcaggaagatttttaccattcctgaaggacaaccgggaaaagatcgagaagatcctgacctt
ccgcatccccactacgtgggcccctctggccaggggaaacagcagattcgcttgatgaccgaaaagagcgaggaaccatcacccc
ctggaacttcgaggaagtggtggacaagggcgcttcgccccagagcttcatcgagcggatgaccaacttcgataagaacctgcccaa
cgagaagtgctgcccagcacagcctgctgtacgagtacttcacctgtataacgagctgaccaaaagtgaatacgtgaccgaggg
aatgagaaaagcccgccttcttgagcggcgagcagaaaaaggccatcgtggacctgctgttcaagaccaaccggaaaagtgacctgaa
gcagctgaaaaggagctacttcaagaaaatcgagtgccttcgactccgtggaaatctccggcgtggaagatcggttcaacgcctccct
gggcacataccacgatctgctgaaaattatcaaggacaaggacttctggacaatgaggaaaacgaggacattctggaagatatcgt
gctgacctgacactgtttgaggacagagagatgatcgaggaacggctgaaaacctatgccacctgttcgacgacaaaagtgatgaa
gcagctgaagcggcggagatacacccggctggggcgaggtgagccggaagctgatcaacggcatccgggacaagcagtcgggcaagac
aatcctggatttctgaagtcggacggcttcgccaacagaaacttcatgcagctgatccacgacgacagcctgacctttaaagagga
catccagaaaagcccaggtgtccggccagggcgatagcctgcacgagcacattgccaatctggccggcagccccgccattaagaagg
catcctgcagacagtgaaagtggtggacgagctcgtgaaagtgatggccggcacaagcccagagaacatcgtgatcgaatggccag
agagaaccagaccaccagaaggacagaagaacagccgcgagagaatgaagcggatcgaagagggcatcaaagagctgggcagcca
gatcctgaaagaacaccccgtggaaaacacccagctgcagaacgagaagctgtacctgtactacctgcagaatgggcgggatatgta
cgtggaccaggaactggacatcaaccggctgtccgactacgatgtggaccatatcgtgcctcagagctttctgaaggacgactccat
cgacaacaaggtgctgaccagaagcgacaagaacccgggcaagagcgacaacgtgccttcgaagaggtcgtgaagaagatgaagaa
ctactggcggcagctgctgaacgccaagctgattaccagagaaaagttcgacaatctgaccaaggccgagagaggcgccctgagcga
actggataaggccggcttcatcaagagacagctggtggaaacccggcagatcacaagcacgtggcacagatcctggactcccgat
gaacactaagtacgacgagaatgacaagctgatccgggaagtgaagtgatcacctgaagtccaagctgggtgtccgatttccggaa
ggatttccagttttacaaagtgcgcgagatcaacaactaccaccacgccacgacctacctgaacgccgtcgtgggaaccgccct
gatcaaaaagtaccctaagctggaaagcgagttcgtgtacggcgactacaaggtgtacgacgtgcggaagatgatcgccaagagcga
gcaggaatcggaaggtaccgccaagtaacttcttctacagcaacatcatgaactttttcaagaccgagattacctggccaacgg
cgagatccggaagcggcctctgatcgagacaaacggcgaaacccggggagatcgtgtgggataagggccgggattttgccaccgtgcg
gaaagtgtgagcatgccccaaagtgaatatcgtgaaaaagaccgaggtgcagacagcggttcagcaaaagagtcctatcctgccccaa
gaggaacagcgataagctgatcgccagaaagaaggactgggaccctaagaagtacggcggcttcgacagccccaccgtggcctattc
tgtgtgtggtggtggccaaagtggaaaagggaagtcgaagaaactgaagagtgtgaaagagctgctggggatcccatcatggaag
aagcagcttcgagaagaatcccatcgacttcttggaaagccagggctacaaagaagtgaagaaaggacctgatcatcaagctgcctaa
gtactccctgttcgagctggaaaacggccggaagagaatgctggcctctgcggcggaactgcagaagggaacgaactggccctgcc
ctccaaatatgtgaacttctgtacctggccagccactatgagaagctgaagggtcccccgaggataatgagcagaacacagctgtt
tgtggaacagcacaagcactacctggacgagatcatcgagcagatcagcgagttctccaagagagtatcctggccgacgctaatt
ggacaaagtgtgtccgcctacaacaagcaccgggataagcccatcagagagcaggccgagaatatcatccacctgtttacctgac
caatctgggagccccctgccgccttcaagtaactttgacaccaccatcgaccggaagaggtacaccagcaccaaaagaggtgctggacgc
caccctgatccaccagagcatcacccgctgtacgagacacggatcgacctgtctcagctgggaggcgacaagcgacctgccgccac
aaagaaggtggacaggtgaagaagaagaaagattacaagacgatgacgataagggatcctgaacgcgttaagtgcacaatcaacc
tctggattacaaaatttgtgaaagattgactggtattcttaactatgttgccttttacgctatgtggatacgctgctttaatgcc

[基因修饰细胞（敲除、敲入、点突变）](#) [基础实验服务（动物实验、载体构建）](#)

[病毒包装（慢病毒、非整合慢病毒、腺病毒、腺相关病毒、病毒样颗粒蛋白、脂质体纳米颗粒）](#)

[试剂（常规试剂、感受态、基因敲除敲入点突变试剂盒、滴度检测试剂盒）](#)



tttgtatcatgctattgcttccccgatggctttcattttctcctccttgataaaatcctggttgctgtctctttatgaggagtgtg
gcccgttgtcaggcaacgtggcgtgggtgtgactgtgtttgtgacgcaacccccactggttggggcattgccaccacctgtcagct
cctttccgggactttcgctttccccctccctattgccacggcggaactcatcgccgctgccttggcgcgtgctggacaggggctcg
gctgttgggcaactgacaattccgtgggtgtgtcggggaaatcatcgctcctttccttggtgctcgctgtgttggcacctggattct
gcgcgggacgtccttctgctacgtcccttcggccctcaatccagcggaccttccttcccgcggcctgctgccggctctgccgcctct
tccgctcttcgccttcgcctcagacgagtcggatctccctttggggccctccccgcgtcgactttaagaccaatgacttacaag
gcagctgtagatcttagccactttttaaaagaaaaggggggactggaagggttaattcactcccaacgaagacaagatctgctttt
gcttgtactgggtctctctggttagaccagatctgagcctgggagctctctggctaactaggaacccactgcttaagcctcaataa
agcttgccttgagtgttcaagtagtgtgtgccgctctgttgtgtgactctggttaactagagatccctcagacccttttagtcagt
tggaatctctagcagggccgtttaaacccgctgatcagcctcgactgtgccttctagttagccagccatctgttgtttgccctc
ccccgtgccttccttgaccctggaagggtgccactcccactgtcctttcctaataaaatgaggaaattgcacgcattgtctgagtag
gtgtcattctattctggggggtggggtggggcaggacagcaagggggaggattgggaagacaatagcaggcatgtggggatgcggt
gggctctatggcttctgaggcggaaagaaccagctggggctctaggggggtatccccacgcgcctgtagcggcgcattaagcgggc
gggtgtggtggttacgcgcagcgtgaccgctacacttgccagcgccttagcggcgcctcctttcgctttcttcccttcccttctcgc
cacgttcgcggctttccccgtcaagctctaaatcgggggctccctttagggttcgatttagtgccttacggcacctcgaccccaa
aaaacttgattagggtgatggttcacgtagtggccatcgccctgatagacggtttttcgccctttgacgttggagtccacgttctt
taatagtggactcttgttccaaactggaacaacactcaacctatctcggtctattcttttgatttataagggttttgccgatttc
ggcctattggttaaaaaatgagctgatttaacaaaaatttaacgcgaattaatctgtggaatgtgtgtcagttagggtgtggaag
tccccaggctccccagcaggcagaagtatgcaaagcatgcacctcaatttagtcagcaaccagggtgtggaagtccccaggctcccc
gcaggcagaagtatgcaaagcatgcacctcaatttagtcagcaaccatagtcgcccccctaactccgcccataccgccccctaactccg
cccagttccgcccattctccgcccctatggctgactaatttttttatattatgcagaggccgaggccgctctgcctctgagctattc
cagaagttagtgaggaggcttttttgaggccctaggcttttgcaaaaagctcccgaggcttgatatccattttcggtatctgatcag
cacgtgttgacaattaatcatcgccatagtataatcgccatagtataatcagacaaggtgaggaaactaaaccatggccaagttgacca
gtgccgttccggtgtcaccgcgcgcgacgtcgccggagcggctcagattctggaccgaccggctcgggttctccgggacttcgtgg
aggacgacttcgccggtgtggtccgggacgacgtgacctgttcacagcgcggtccaggaccagggtggtgccggacaacacctgg
cctgggtgtgggtgcgcggcctggacgagctgtacgccgagtggtcgaggctgtgtccacgaacttcgggacgcctccgggcccgg
ccatgaccgagatcggcgagcagccgtggggggcgggagttcgccctgcgcgacccggccggcaactgcgtgcacttcgtggccgagg
agcaggactgacacgtgtacgagatttcgattccaccgccgcttctatgaaaggttgggcttcggaatcgttttccgggacgccg
gctggatgatctccagcgcgggagctcatgtgtgagttcttcgccaccccaacttggtttattgcagcttataatggttacaat
aaagcaatagcatcacaatttcacaaataaagcatttttttactgcattctagtgtgtgttgcctaaactcatcaatgtatctt
atcatgtctgtataccgtcgacctctagctagagcttggcgtaatcatggtcatagctgtttcctgtgtgaaattgttatccgctca
caattccacacaacatacagcgcggaagcataaagtgtaaagcctgggggtgcctaatgagtgcagtaactcacattaattgcgttgc
gtcactgcgcgctttccagtcgggaaacctgtcgtgccagctgcattaatgaatcgccaacgcgcggggagaggcggtttgcgta
ttgggcgctcttccgcttctcgtcactgactcgtgcgctcggtcgttcggctgcggcgagcggtatcagctcactcaaaggcgg
taatacggttatccacagaatcaggggataacgcaggaagaacatgtgagcaaaaggccagcaaaaggccaggaaccgtaaaaagg
ccgcgttgctggcggtttttccataggtccgccccctgacgagcatcacaataatcgacgtcaagtcagaggtggcgaaaccgga
caggactataaagataaccaggcggtttccccctggaagctccctcgtgcgctctcctgttccgacctgccgcttaccggatacctgt
ccgctttctcccttcgggaagcgtggcgctttctcatagctcagctgtaggtatctcagttccggtgtaggtcgttcgctccaagc
tgggctgtgtgcacgaacccccgttcagcccagccgtgcgccttatccggtaactatcgtcttgagtccaaccggtaagacacg
acttatcgccactggcagcagccactggtaacaggattagcagagcgaggatgtaggcggtgtacagagttcttgaagtgtggc
ctaactacggctacactagaagaacagtatgtgtatctgcgctctgctgaagccagttaccttcggaaaaagagttggtagctctt

基因修饰细胞（敲除、敲入、点突变） 基础实验服务（动物实验、载体构建）

病毒包装（慢病毒、非整合慢病毒、腺病毒、腺相关病毒、病毒样颗粒蛋白、脂质体纳米颗粒）

试剂（常规试剂、感受态、基因敲除敲入点突变试剂盒、滴度检测试剂盒）



gatccggcaaacaccaccgctggtagcgggtggtttttttgtttgcaagcagcagattacgcgcagaaaaaaggatctcaagaag
atcctttgatctttttctacggggtctgacgctcagtggaacgaaaactcacgttaagggttttggatcatgagattatcaaaaagga
tcttcacctagatccttttaaatataaaatgaagtttttaataatctaaagtatatatgagtaaaacttggtctgacagttaccaat
gcttaatcagtgaggcacctatctcagcgatctgtctatttcgttcatccatagttgcctgactccccgctcgtgtagataactacga
tacgggaggggttaccatctggccccagtgctgcaatgataccgcgagacccacgctcaccggctccagatttatcagcaataaacc
agccagccggaaggcgagcgcagaagtggctcctgcaactttatccgctccatccagtcatttaattgttgccgggaagctagag
taagtagttcgccagttaatagtttgcgcaacgttgttgccattgctacaggcatcgtgggtgtcacgctcgtcgtttggtagtggtt
cattcagctccggttcccaacgatcaaggcgagttacatgatcccccatgttgtgcaaaaaagcggttagctccttcggctcctccga
tcgttgtcagaagtaagttggccgagtggttatcactcatggttatggcagcactgcataattctcttactgtcatgccatccgtaa
gatgctttttctgtgactggtagtactcaaccaagtcatctctgagaatagtgtatgcggcgaccgagttgctccttggccggcgctcaa
tacgggataataccgcgccacatagcagaactttaaaagtgtcatcattggaaaacgttcttcggggcgaaaactctcaaggatct
taccgctgttgagatccagttcgatgtaaccactcgtgcaccaactgatcttcagcatcttttactttaccagcgtttctgggt
gagcaaaaacaggaaggcaaaatgccgcaaaaaagggaataaggcgacacggaaatgttgaataactcatactcttctttttcaat
attattgaagcattttatcagggttattgtctcatgagcggatacatatttgatgtatttagaaaaataaacaatagggttccgc
gcacatttccccgaaaagtgccacctgacgtcgacggatcgggagatctcccgatccccatggtgcactctcagtacaatctgctc
tgatgccgcatagtttaagccagtatctgtcctctgcttgtgtgttgagggtcgtgagtagtgccgcgagcaaaatttaagctacaac
aaggcaaggcttgaccgacaattgcatgaagaatctgcttaggggttaggcgttttgcgctgcttcgcgatgtacgggccagatatac
gcgttgacattgattattgactagttattaatagtaatacaattacgggggtcatttagttcatagcccatatatggagtcccggttac
ataacttacggtaaatggcccgctggctgaccgccaacgacccccgccattgacgtcaataatgacgtatgttcccatagtaac
gccaatagggaactttccattgacgtcaatgggtggagtatttacggtaaaactgccacttggcagtagatcaagtgtatcatatgcc
aagtacgccccctattgacgtcaatgacggtaaatggccgcctggcatttatgccagtagatgaccttatgggactttctacttg
gcagtacatctacgtattagtcacgtctattaccatgg



GENECARER 关注基恩科公众号获取更多资讯

- Website www.genecarer.com
- Service hotline 029-84613682

[基因修饰细胞（敲除、敲入、点突变）](#) [基础实验服务（动物实验、载体构建）](#)

[病毒包装（慢病毒、非整合慢病毒、腺病毒、腺相关病毒、病毒样颗粒蛋白、脂质体纳米颗粒）](#)

[试剂（常规试剂、感受态、基因敲除敲入点突变试剂盒、滴度检测试剂盒）](#)