

pAdTrack-CMV-GFP-CMV-NeoR质粒说明书

【质粒信息】

产品货号	GC040100606		
产品名称	pAdTrack-CMV-GFP-CMV-NeoR		
产品规格	☒ 小提 (≥2ug)	☐ 中提 (≥35ug)	☐ 大提 (≥500ug)
原核抗性	KanR		
真核抗性	NeoR		
荧光标记	GFP		
高/低拷贝	高		
培养温度	37°C		
感受态	DH5a		

【保存与扩增】

- 1.保存：质粒置于-20°C 保存，穿刺菌置于 4°C 保存
- 2.质粒扩增：收到质粒后离心，-80°C 取出感受态细胞，取 1uL 质粒加至 100ul 感受态中，冰浴 30min；42°C 热击 90s，再冰浴 2min，混合液体直接涂板，倒置培养 12-16h，挑单克隆至液体培养基中，震荡 12-16h，提取质粒。
- 3.菌液扩增：经划线培养后挑克隆至相应抗性 LB 培养基中。

【注意事项】

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

【使用说明】


首次使用 2μg 包装的本产品时，请先取少量本质粒转化大肠杆菌，进行质粒小量、中量或大量抽提后再用于后续用途。
抽提获得的质粒可以通过酶切电泳进行鉴定，或通过测序进行鉴定。

【质粒图谱】

[基因修饰细胞（敲除、敲入、点突变）](#) [基础实验服务（动物实验、载体构建）](#)

[病毒包装（慢病毒、非整合慢病毒、腺病毒、腺相关病毒、病毒样颗粒蛋白、脂质体纳米颗粒）](#)

[试剂（常规试剂、感受态、基因敲除敲入点突变试剂盒、滴度检测试剂盒）](#)

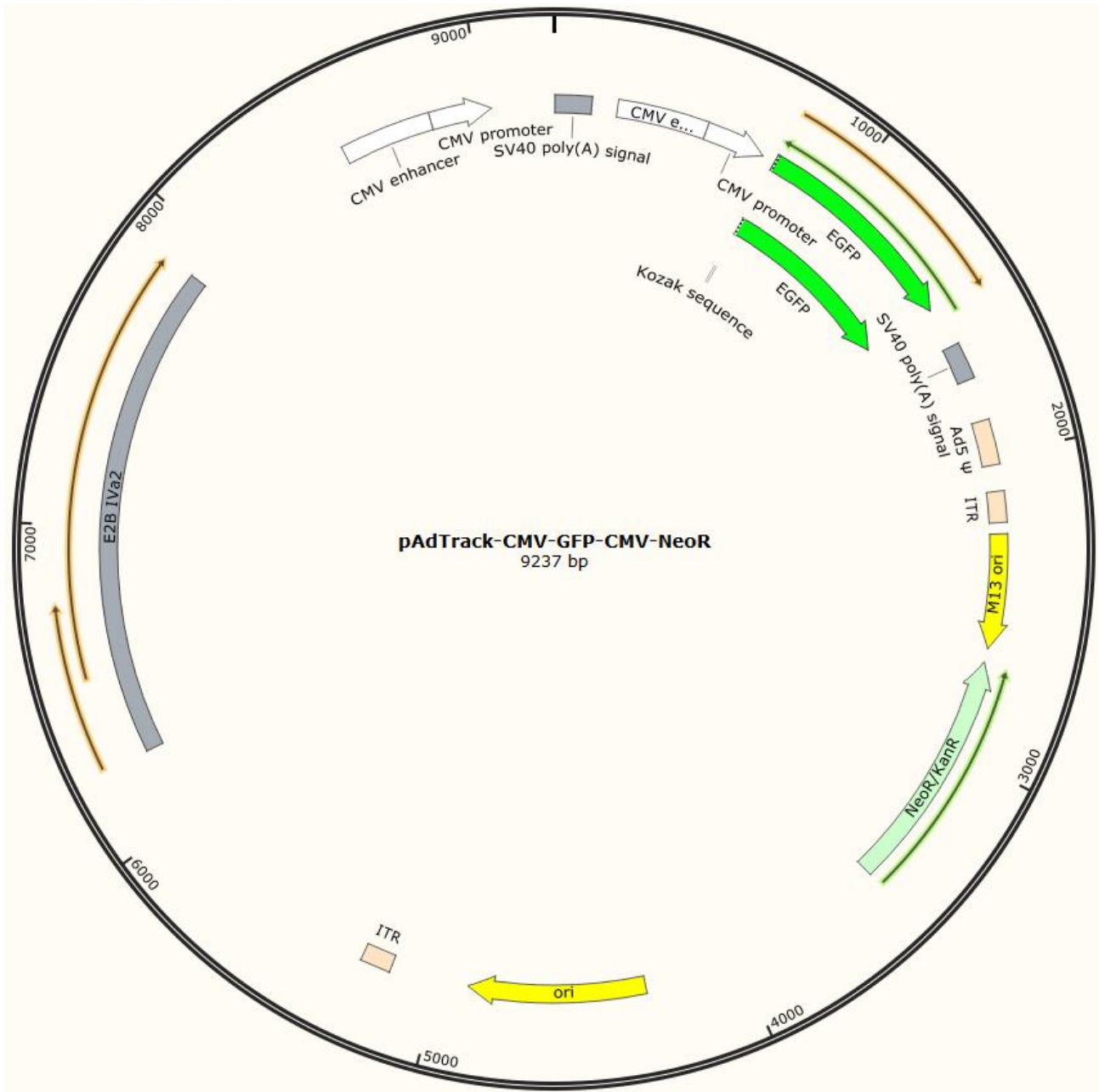

【质粒序列】

tggttaacttggtttattgcagcttataatggttacaaataaagcaatagcatcacaaatttcacaaataaagcatttttttactgca
 ttctagttgtggtttgtccaaactcatcaatgtatcttaacgcggagggtttatcgacgatctgctagtgttaataatagtaataatca
 cggggtcatttagttcatagcccatatatggagttccgcgttacataacttacggtaaatggcccgcttggtgacgcccacgacc
 cccgcccattgacgtcaataatgacgtatgttcccatagtaacgccaatagggactttccattgacgtcaatgggtggagtatttac
 ggtaaactgcccacttggcagtagcatcaagtgtatcatatgccaaagtacgccccctattgacgtcaatgacggtaaatggcccgct
 ggcattatgcccagtagcatgaccttatgggactttcctacttggcagtagcatctacgtatttagtcacgctattaccatggtgatgc
 ggttttggcagtagcatcaatgggcgtggatagcgggttgactcacggggatttccaagtctccaccccattgacgtcaatgggagtt

[基因修饰细胞（敲除、敲入、点突变）](#) [基础实验服务（动物实验、载体构建）](#)

[病毒包装（慢病毒、非整合慢病毒、腺病毒、腺相关病毒、病毒样颗粒蛋白、脂质体纳米颗粒）](#)

[试剂（常规试剂、感受态、基因敲除敲入点突变试剂盒、滴度检测试剂盒）](#)



tgttttggcaccaaaatcaacgggactttccaaaatgtcgtacaactccgccccattgacgcaaattgggcggtaggcgtgtacggg
gggaggtctatataagcagagctggtttagtgaaccgtcagatccgctagcgtaccggctgccaccatgggtgagcaagggcgagga
gctgttcaccggggtgggtgccatcctggctgagctggacggcgacgtaaacggccacaagttcagcgtgtccggcgagggcgaggg
cgatgccacctacggcaagctgacctgaagttcatctgcaccaccggcaagctgcccgtgccctggcccaccctcgtgaccaccct
gacctacggcgtgcagtgcctcagccgctaccccgaccacatgaagcagcacgacttcttcaagtcgccatgccggaaggctacgt
ccaggagcgcaccatcttcttcaaggacgacggcaactacaagaccgcgccgaggtgaagttcgaggcgacaccctgggtgaaccg
catcgagctgaagggcatcgacttcaaggaggacggcaacatcctggggcacaagctggagtacaactacaacagccacaacgtcta
tatcatggccgacaagcagaagaacggcatcaaggtgaacttcaagatccgccacaacatcgaggacggcagcgtgcagctcgcca
ccactaccagcagaacacccccatggcgacggccccgtgctgctgcccgacaaccactacctgagcaccacgtccgccctgagcaa
agaccccaacgagaagcgcgatcacatggctcctgctggagtctgtgaccgcgcgggatcactctcgcatggacgagctgtacaa
gtccggactcagatccaccggatctagataactgatcataatcagccataccacattttagtagaggttttacttgccttaaaaaacct
cccacacctccccctgaacctgaacataaaaatgaatgcaattgttgttgaacttgtttattgcagcttataatgggttacaata
aagcaatagcatcacaatttccacaataaagcatttttttactgcattcttagttgtggtttgtccaaactcatcaatgtatctta
acgcgatcaagctagcttgcctagactcgactgactataataataaaacgccaactttgaccgggaacgcggaaaacacctgagaaaa
acacctgggcgagctctccacgtaaacgggtcaaagtccccgcggccctagacaaatattacgcgctatgagtaacacaaaattattca
gatttcaattctcttattcagttttcccgcaaaaatggccaaatcttactcggttacgccccaaatttactacaacatccgcctaaa
accgcgcgaaaattgtcacttctgtgtacaccggcgacacccaaaacgtcacttttgccacatccgtcgcttacatgtgttccgc
cacacttgaacatcacacttccgccacactactacgtcaccgcgccgttcccaacgcgcccgccacgtcacaactccacccccct
cattatcatatttggttcaatccaaaataaggtatattattgatgatgttaattaagaattaattcgatcctgaatggcgaatggac
gcgccctgtagcggcgcatcattaagcgcggcggtgtggtggttacgcgcagcgtgaccgctacacttgccagcgccctagcggccgt
cctttcgctttcttcccttcttctcgcacgttccgcggctttccccgtcaagctctaaatcgggggctcccttttagggttccga
tttagtgctttacggcacctcgacccccaaaaaacttgattaggggtgatggttcacgtagtgggccatcgccctgatagacgggtttt
cgccctttgacgttggagtccacgttctttaatagtggactcttgttccaaactggaacaacactcaacctatctcggtctattct
tttgatttataagggtttttgccgatttcggcctattggttaaaaaatgagctgatttaacaaaaattttaacaaaattcagaagaa
ctcgtcaagaaggcgatagaaggcgatgcgctgcgaatcgggagcggcgataaccgtaaagcacgaggaagcgggtcagccattcgcc
gccaaactcttcagcaatatcacgggtagccaacgtatgtcctgatagcggctcgccacacccagcggccacagtcgatgaatcc
agaaaagcggccattttccacatgatattcggaagcaggcatcgccatgggtcacgacgagatcctcgccgtcgggcattgctgc
cttgagcctggcgaacagttcggttggegcgagccctgatgtcttctgctccagatcactctgatcgacaagaccggttccatccg
agtacgtgctcgctcgatgcgatgttctgcttgggtggtcgaaatgggcaggttagccgatcaagcgtatgcagccggccattgcac
agccatgatggatactttctcggcaggagcaaggtgagatgacaggagatcctgccccggcacttgcgccaatagcagccagtcct
tcccgcttcagtgcacacgtcgagcacagctgcgcaaggaacgcccgtcgtggccagccacgatagccgcgctgcctcgtcttgag
ttcattcagggcacccggacaggtcggtcttgacaaaaagaacggggcgccctgcgctgacagccggaacacggcgccatcagagca
gccgattgtctgttgtgccagtcatagcgaatagcctctccaccaacggcgccgagaacctgcgtgcaatccatcttgttcaat
catgcgaacgatcctcatcctgtctcttgatcagagcttgatccctgcgccatcagatccttggcggcaagaaagccatccagtt
tactttgcagggcttcccaaccttaccagagggcgccccagcttggaattccgggttcgcttgcgtgtccataaaacggccagtcgat
ctatcgccatgtaagcccactgcaagctacctgcttctcttgcgcttgcgttttcccttgcgcatagcccagtagctgacatt
catccggggtcagcacccgtttctgcggactggctttctacgtgaaaaggatctaggtgaagatcctttttgataatctcatggctgc
agcaatggcaacaacgttgcgcaactatttaactggcgaactacttactctagcttcccggaacaattaatagactggatggagc
ggataaagttgcaggaccacttctgcgctcggcccttccggctgggttattgtgtataaatctggagccgggtgagcgtgggtc
tcgcggtatcattgcagcactggggccagatggtaagccctccgctatcgtagttatctacacgacggggagtcaggcaactatgga
tgaacgaaatagacagatcgctgagataggtgcctcactgattaagcattggtaactgtcagaccaagtttactcatatatacttta

基因修饰细胞（敲除、敲入、点突变） 基础实验服务（动物实验、载体构建）

病毒包装（慢病毒、非整合慢病毒、腺病毒、腺相关病毒、病毒样颗粒蛋白、脂质体纳米颗粒）

试剂（常规试剂、感受态、基因敲除敲入点突变试剂盒、滴度检测试剂盒）



gattgatttaaaacttcatttttaatttaaaaggatctaggtgaagatcctttttgataatctcatgacccaaatcccttaacgtga
gttttcgttccactgagcgtcagaccccgtagaaaagatcaaaggatcttcttgagatccttttttctgcgcgtaactctgctgctt
gcaaacaaaaaaccaccgctaccagcgggtggtttgtttgccgatcaagagctaccaactctttttccgaaggtaactggcttcag
cagagcgcagataccaaatactgtccttctagtgtagccgtagtttaggccaccacttcaagaactctgtagcaccgcctacatacct
cgctctgctaatacctgttaccagtggctgctgccagtggcgataagtcgtgtcttaccgggttggactcaagacgatagttaccgga
taaggcgcagcggctcggtgtaacgggggttctgtgcacacagcccagcttgagcgaacgacctacaccgaactgagatacctaca
gcgtgagctatgagaaagcgcacgcttcccgaaggagaaaggcggacaggtatccggttaagcggcagggtcggaacaggagagcg
cacgaggagcttccagggggaaacgccttggtatctttatagtcctgtcgggttctgccacctctgacttgagcgtcgatttttgtg
atgctcgtcagggggcgagcctatggaaaaacgccagcaacgcggcctttttacggttctctggccttttctgtggccttttctca
catgttcttttctgcgttatccctgattctgtggataaccgtattaccgcctttgagtgcgtgataccgctcgcgcagccgaac
gaccgagcgcagcagtgagtgagcaggaagcggagagcgcctgatgcggtattttctccttacgcactctgtgcggtatttcaca
ccgcataatggatccatgcagttaattaacatcatcaataatataccttatttttgattgaagccaatatgataatgagggggtgga
gtttgtgacgtggcgcggggcgtgggaacggggcggtgacgtaggttttagggcgagtaacttgatgtgttgggaattgtagtt
ttcttaaaatgggaagtgcgtaacgtgggaaaacggaagtgcgatttgaggaagttgtgggttttttgctttctgttctgggcg
taggttcgcgtcgggttttctgggtgtttttgtggactttaaccgttacgtcatttttttagtcctatatatactcgtctgcactt
ggcccttttttacactgtgactgattgagctggtgccgtgctcagtggtgttttttaaataggttttcttttttactggtaaggctg
actgttatggctgccgctgtggaagcgtgtatgttgttctggagcgggagggtgctattttgcctaggcaggagggttttccaggt
gtttatgtgtttttctctcctatttaattttgttatacctcctatgggggctgtaatgttgtctctacgcctgcgggtatgtattccc
ccgggctatttcggtcgttttttagcactgaccgatgtgaatcaacctgatgtgtttaccgagctttacattatgactccggacatg
accgaggagctgtcgggtggtgctttttaatcacggtgaccagtttttttacggtcacgccggcatggccgtagtccgtcttatgctt
ataagggtgtttttctgttgaagacaggcttctaagtgttaaatgttttttgttattttttgtgtttatgcagaaacccg
cagacatgtttgagagaaaaatggtgtctttttctgtggtggttccggagcttacctgcctttatctgcatgagcatgactacgatg
tgctttcttttttgcgcgaggtttgcctgattttttgagcagcacttgcattttatatcgccgcccatgcaacaagctattgaat
tcgtttaaactccctctcaagctctgtatacggggacacggacagccttttcgtcaccgagcgtggacaccggctcatggaaaccaga
ggtaagaaacgcatcaaaaagcatgggggaaacctggtttttgaccccgaacggccagagctcacctggctcgtggaatgcgagacc
gtctgcggggcctgcggcgcggatgcctactccccggaatcggtattttctgcgcgccaaagctctacgccctcaaaagctgcactgc
ccctcgtgcggcgccctcctcaagggaagctgcgcgccaaaggccacgccgcggaggggctggactatgacacatggtcaaatgc
tacctggccgacgcgcagggcgaagaccggcagcgttcagcaccagcaggaccagcctcaagcgcaccttgccagcgcgcagccc
ggagcgcaccccttcaccgtgaccagactacgtgacgaggacctgcgcccgtggaaagacatgacctggcccgtctggacagag
caccgactactgccgtacagcgaagaccgccccaaaccgcgaaacgaggagatatgctggatcgagatgccgtagagcaggtgaccg
agctgtgggaccgcctggaactgcttggtcaaacgctcaaaagcatgcctacggcggacggtctcaaacggttgaaaaactttgctt
ccttgcaagaactgctatcgctggcggcgagcgccttctggcggatttggtcagggaacacatgcgagtcaggggacatgcttaacg
aagtggccccctgctcagggtgacggcagctgcagctctcttaactaccagttgcagccggttaataggtgtgatttacggggcca
ccggctgcggtaagtcgcagctgctcaggaacctgctttcttcccagctgatctcccctaccccggaaaccttttcttcatcgccc
cgcaggtagacatgatcccccatctgaactcaaacgctgggaaatgcaaatctgtgagggttaactacgccccgtggcccgatggaa
ccattataccgcagctctggcaccctccgcccgcgtttgtaaaaatggcctatgacgatctcatctggaacacaactatgacgtta
gtgatcccagaaatatcttcgccaggccgcccgcgtgggcccattgccatcattatggacgaatgcatggaaaatcttggaggctc
acaaggcgctctccaagttcttccacgcatttcttcttaagctacatgacaaaatttcccaagtgaccggatacactgtgctggtgg
ttctgcacaacatgaatccccggagggatatggctgggaacatagccaacctaaaaatacagttcaagatgcatctcatatccccac
gtatgacccatcccagcttaaccgctttgtaaaccttacaccaaggccctgcccctggcaatcagcttgctactgaaagacattt
ttaggcaccacgcccagcgtcctgctacgactggatcatctacaacaccaccccgagcatgaagctctgcagtggtgctacctcc

基因修饰细胞（敲除、敲入、点突变） 基础实验服务（动物实验、载体构建）

病毒包装（慢病毒、非整合慢病毒、腺病毒、腺相关病毒、病毒样颗粒蛋白、脂质体纳米颗粒）

试剂（常规试剂、感受态、基因敲除敲入点突变试剂盒、滴度检测试剂盒）



acccagagacgggcttatgcccattgtatctgaacatccagagtcacctttaccacgtcctggaaaaatacacaggaccctcaacg
accgagaccgctgggtcccgggctaccgcgcgcgcaaaacccctaataaagacagcaagacacttgccttgatccaaatccaaacag
agtctggttttttatttatgttttaaacgcattgggaggaggaggaagccttcagggcagaaacctgtggcgcagatccaacagct
gctgagaaacgacattaagttcccgggtcaaagaatccaattgtgccaaaagagccgtcaacttgtcatcgcggcggtatgaacggg
aagctgcactgcttgcaagcgggctcaggaaagcaaagtcagtcacaatcccgcggcggtggctgcagcggctgaagcggcgggcgg
aggctgcagtctccaacggcgttcagacacggtctcgtaggtcaaggtagtagagtttgcgggcaggacggggcgaccatcaatgc
tggagcccatcacattctgacgcaccccgcccatgggggcatgcgcgttgtcaaatatgagctcacaatgcttccatcaaacgagt
tggtgctcatggcgggcggtgctgcaaaacagatacaaaactacataagacccccaccttatatatctttccacccttaacc
acgccagatcctctagcagtgataaacgtctaataagtaataattacggggtcattagttcatagcccatatatggagttccgcgt
tacataacttacggtaaatggccgcctggctgaccgccaacgacccccgccattgacgtcaataatgacgtatgttcccatagt
aacgccaatagggactttccattgacgtcaatgggtggagtatttacggtaaacgtgccacttggcagttacatcaagtgtatcatat
gccagtagcggccctattgacgtcaatgacggtaaatggccgcctggcattatgccagttacatgaccttatgggactttcctac
ttggcagttacatctacgtatttagtcatcgttattaccatgggtgatgcggttttggcagttacatcaatgggcgtggatagcggtttga
ctcacgggattttcaagttctccacccattgacgtcaatgggagtttgttttggcaccaaaatcaacgggactttccaaaatgtcg
taacaactccggccattgacgcaaatggcggttaggcgtgtacggtgggaggtctatataagcagagctggtttagtgaaccgtca
gatccgctagagatctggtaccgtcgacgcggccgctcgagcctaagcttctagataagatatccgatccaccggatctagataact
gatcataatcagccataccacattttagaggttttacttgccttaaaaaacctcccacacctccccctgaacctgaaacataaaat
gaatgcaattgttgt



GENECARER 关注基恩科公众号获取更多资讯

- Website www.genecarer.com
- Service hotline 029-84613682

[基因修饰细胞（敲除、敲入、点突变）](#) [基础实验服务（动物实验、载体构建）](#)

[病毒包装（慢病毒、非整合慢病毒、腺病毒、腺相关病毒、病毒样颗粒蛋白、脂质体纳米颗粒）](#)

[试剂（常规试剂、感受态、基因敲除敲入点突变试剂盒、滴度检测试剂盒）](#)