

Lenti-CRISPR-V2-BSD质粒说明书

【质粒信息】

产品货号	GC010100699		
产品名称	Lenti-CRISPR-V2-BSD		
产品规格	☒ 小提 (≥2ug)	☐ 中提 (≥35ug)	☐ 大提 (≥500ug)
原核抗性	Amp		
真核抗性	BSD		
荧光标记	无		
高/低拷贝	高		
培养温度	37°C		
感受态	DH5a		

【保存与扩增】

- 1.保存：质粒置于-20°C 保存，穿刺菌置于 4°C 保存
- 2.质粒扩增：收到质粒后离心，-80°C 取出感受态细胞，取 1uL 质粒加至 100ul 感受态中，冰浴 30min；42°C 热击 90s，再冰浴 2min，混合液体直接涂板，倒置培养 12-16h，挑单克隆至液体培养基中，震荡 12-16h，提取质粒。
- 3.菌液扩增：经划线培养后挑克隆至相应抗性 LB 培养基中。

【注意事项】

- 本质粒未经基恩科（Genecaere）生物书面许可不得用于任何商业用途，也不得移交给订货人所在实验室外的任何个人或单位。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

【使用说明】


首次使用 2μg 包装的本产品时，请先取少量本质粒转化大肠杆菌，进行质粒小量、中量或大量抽提后再用于后续用途。
抽提获得的质粒可以通过酶切电泳进行鉴定，或通过测序进行鉴定。

[基因修饰细胞（敲除、敲入、点突变）](#) [基础实验服务（动物实验、载体构建）](#)

[病毒包装（慢病毒、非整合慢病毒、腺病毒、腺相关病毒、病毒样颗粒蛋白、脂质体纳米颗粒）](#)

[试剂（常规试剂、感受态、基因敲除敲入点突变试剂盒、滴度检测试剂盒）](#)

【质粒图谱】

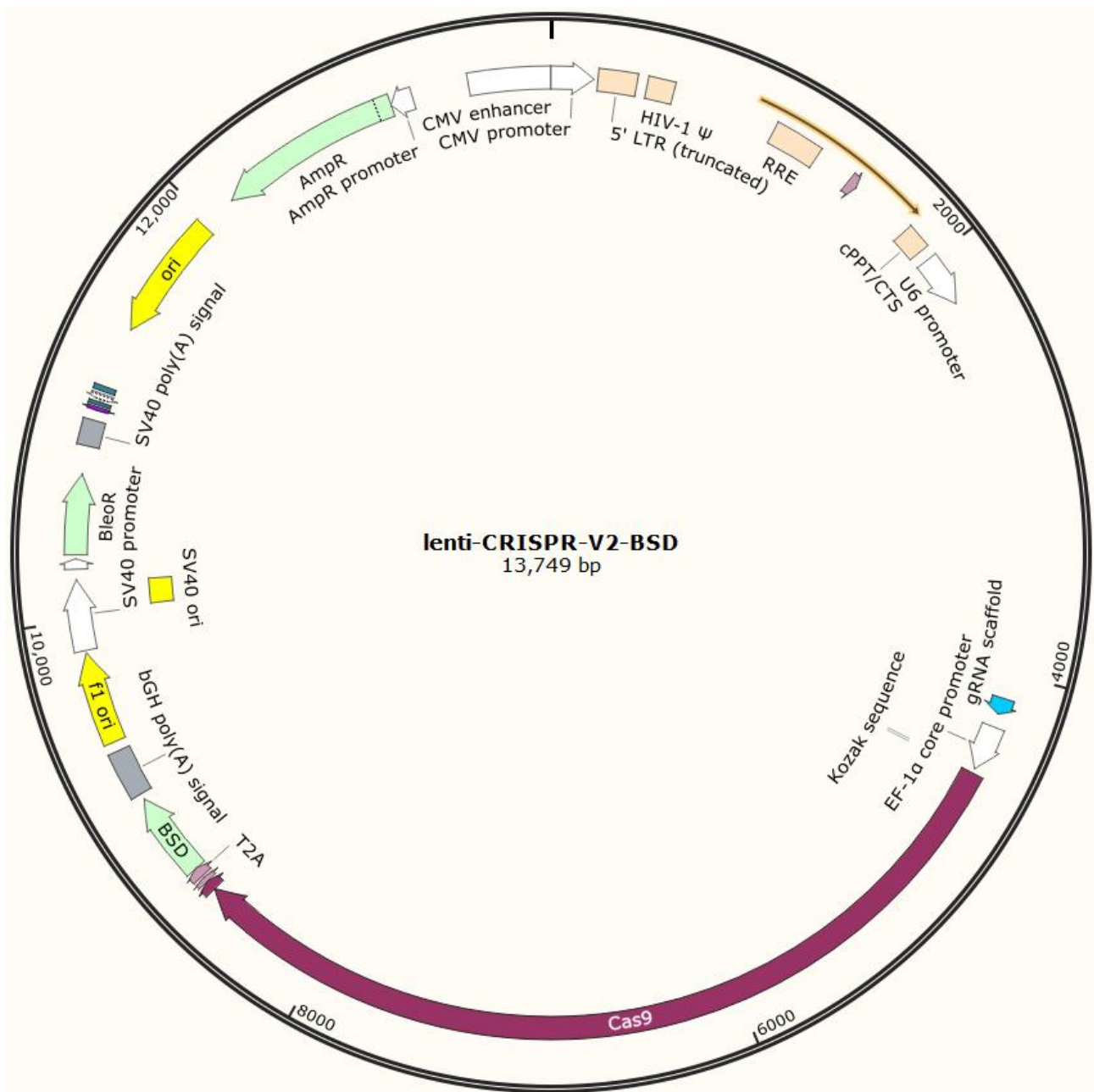

【质粒序列】

tgatgcggttttggcagtacatcaatgggcgtggatagcggtttgactcacggggatttccaagtctccacccattgacgtcaatg
ggagtttgttttggcaccaaaatcaacgggactttccaaaatgtcgtacaacactccgccccattgacgcaaattgggcggtaggcgtg
tacggtgggaggtctatataagcagcgcgttttgcctgtactgggtctctctggttagaccagatctgagcctgggagctctctggc

[基因修饰细胞（敲除、敲入、点突变）](#) [基础实验服务（动物实验、载体构建）](#)

[病毒包装（慢病毒、非整合慢病毒、腺病毒、腺相关病毒、病毒样颗粒蛋白、脂质体纳米颗粒）](#)

[试剂（常规试剂、感受态、基因敲除敲入点突变试剂盒、滴度检测试剂盒）](#)



taactaggggaacccactgcttaagcctcaataaagcttgcccttgagtgcctcaagtagtgtgtgcccgctctgttggtgactctggtaactagagatccctcagacccttttagtcagtggtgaaatctctagcagtgggcgccgaacagggacttgaaagcgaaagggaaacagaggagctctctcagcgcaggactcggccttgctgaagcgcgcacggcaagaggcagggggcggcgactggtagtacgcaaaaaa ttttgactagcggaggctagaaggagagagatgggtgcgagagcgtcagtattaagcgggggagaattagatcgcgatgggaaaaaa ttcggttaaggccagggggaaagaaaaatataaattaaaacatatagtatgggcaagcagggagctagaacgattcgcagttaatc ctggcctgttagaaacatcagaagcgtgtagacaaatactgggacagctacaaccatcccttcagacaggatcagaagaacttagat cattatataatacagtagcaaccctctattgtgtgcatcaaaggatagagataaaagacaccaaggaagctttagacaagatagagg aagagcaaaacaaaagtaagaccaccgcacagcaagcgccgctgatcttcagacctggaggaggagatatgagggacaattggaga agtgaattatataaaatataaagtagtaaaaattgaaccattaggagtagcaccaccaaggcaagagaagagtggtgcagagagaa aaaagagcagtggaataggagctttgttccttgggttcttgggagcagcaggaagcactatgggcgcagcgtcaatgacgctgacg gtacaggccagacaattattgtcttggtatagtgacagcagacaacaatttgctgagggctattgaggcgcaacagcatctgttgcaa ctcacagctctggggcatcaagcagctccaggcaagaatcctggctgtggaagatacctaaggaatcaacagctcctggggatttgg ggttgctctgaaaaactcatttgcaccactgctgtgccttgggaatgctagttggagtaataaatctctggaacagatttggaaatcac acgacctggatggagtgggacagagaaattaacaattacacaagcttaatacactccttaattgaagaatcgcaaaaccagcaagaa aagaatgaacaagaattatttggaaatagataaatgggcaagtttgttggaaattggtttaacataacaaattggctgtggtatataaaa ttattcataatgatagtaggaggttggtaggtttaagaatagtttttgcgtgactttctatagtgaaatagagtttaggcagggatatt tcaccattatcgtttcagaccacctcccaaccccgaggggacccgacaggccgaaggaatagaagaagaaggtggagagagagac agagacagatccattcgattagtgaacggatcggcactgcgtgcgccaattctgcagacaaatggcagttatccatccacaattttaa aagaaaaggggggattgggggtacagtgcaggggaaagaatagtagacataatagcaacagacatacaaaactaaagaattacaaaa acaaaattacaaaaattcaaaatttctgggtttattacagggacagcagagatccagtttggtaattaaaggtaccgagggcctattt cccatgattccttcataatttgcataacgatacaaggtgttagagagataattagaatttaattgactgtaaacacaaagatatta gtacaaaatcagtgacgtagaaagtaataatttcttgggtagtttgcagttttaaaattatgttttaaaatggactatcatatgctt accgtaacttgaaagtatttctgatttcttggctttatatacttgttggaaggacgaaacaccggagacggttgtaaatgagcacac aaaatacacatgctaaaaatattatattctatgacctttataaaatcaacaaaatcttctttttaataacttttagtatcaataatta gaatttttatgttcccttttgcacacttttaataaaaaatgagcaaaataaaaaaacgctagtttttagtaactcgctgtgtttcttc accttaataatagctactccaccactgttctctaagcggtcagctcctgcttcaatcattttttgagcatcttcaaatgttctaac tccaccagctgctttaactaaagcattgtctttaacaactgacttcattagtttaacatcttcaaatgttgcacctgattttgaaaa tccctgttgatgttttaacaaattctaataccagcttcaacagctatttcacaagcttccatgatttcttctttgttaataaacaatt ttccataatacatttaacaacatgtgatccagctgcttttttacagcttccatgtcttctaaaactaattcataatttttgtcttt taatgcaccaatatttaataccatatcaatttctgttgcaccatctttaattgcttcagaaacttcgaatgctttttagctgttgt gcattgcacctagaggaaaacctacaacatttgttatcctacatttgtgccttttaataattctttacaatagcttgttcaatatga attaacacaaactgttgcaaaatcaaatcaattgcttcacataattgtttaatttcagcttccgtagcatcttgttttaataa tgtgtgatctatataatttgttttagtttcatttttctctatataattcatttttaatttttaattcttttaataatttctgtctacttta acttttagcgttttgaacagattcaccaacacctataaaataaatttttagtttaggttcagttccacttgggcgaacagcaaatcat gacttatcttctaaataaaatttttagtaagcttctgtcctggcatattatacattccatcgatgtagtcttcaacattaacaacttta agtccagcaatttgagttaagggtgttgcctcctaatgatttcattaatggttcaatttttaatttcttcttcttggtttaaaattc aagtttaagtgaaagtgtaatatgcaccatttctttaataaatcttctaataatgcttactaatgttttatgttttttataa aatcaagcagcctctgctattaataatagaagcttgtattccatctttatctctagctgagtcacatcaattacatatccataactttct tcataagcaaaaacaaaatttaaatccgttatcttcttctttagcaatttctctacccattcatttaaatccagttaaagtttttaca atattaactccatatttttcatgagcgattctatcaccacaaatcacttgttacaaaacttgaatatagagccggttttttggaaatg ctatttaagcgttttagatttggataattttcaatcaattaaaatttggtcctgtttgatttccatctaattcttaaaaatgaccatca

[基因修饰细胞（敲除、敲入、点突变）](#) [基础实验服务（动物实验、载体构建）](#)

[病毒包装（慢病毒、非整合慢病毒、腺病毒、腺相关病毒、病毒样颗粒蛋白、脂质体纳米颗粒）](#)

[试剂（常规试剂、感受态、基因敲除敲入点突变试剂盒、滴度检测试剂盒）](#)



tgttttattgccattccaaatctgtcagcatctgggtcattcataataataatctgcatcatgtttaataccatattcaagcgggt
atttttcatgcaggatcaaattctggatttggatttacaacattttttaaatgtttcatcttcaaatgcatgctcttcaacctcaata
acgttatatcctgattcacgtaatatttttggggtaaattttagttcctgttccattaactgcgctaaaaataattttttaaatctttt
ttagcttcttgcctttttttgtacgtctctgttttagagctagaaatagcaagttaaaataaggctagtcggttatcaacttgaaaa
agtggcaccgagtcggtgcttttttgaattcgttagcttaggtcttgaaaggagtgggaattggctccggtgcccgtcagtgggcaga
gcgcacatcggccacagtcggcgagaagttggggggagggtcggaattgatccggtgcctagagaaggtggcgcggggtaaactg
ggaaagtgatgtcgtgtactggctccgcctttttcccgagggtgggggagaaccgtatataagtgcagtagtcgccgtgaacgttct
ttttcgcaacgggtttgcccgcagaacacaggaccggttctagagcgtgccaccatggacaagaagtacagcatcgccctggacat
cggcaccaactctgtgggctggggcgtgatcaccgacgagtacaaggtgcccgcaagaaattcaaggtgctgggcaacaccgaccg
gcacagcatcaagaagaacctgatcggagccctgctgttcgacagcggcgaaacagccgaggccaccggctgaagagaaccgccag
aagaagatacaccgacggaagaaccggatctgctatctgcaagagatcttcagcaacgagatggccaaggtggacgacagcttctt
ccacagactggaagagtcttctcgttgggaagaggataagaagcagcagcggcaccccatcttcggcaacatcgtggacgaggtggc
ctaccacgagaagtagccccaccatctaccacctgagaaagaaactgggtggacagcaccgacaaggccgacctgcggtgatctatct
ggccctggcccacatgatcaagttccggggccacttctgatcagggcgacctgaaccccgacaacagcgacgtggacaagctgtt
catccagctggtgcagacctacaaccagctgttcgagggaaaaccccatcaacgccagcggcgtggacgccaaggccatcctgtctgc
cagactgagcaagagcagacggctggaaaatctgatcgccagctgcccggcgagaagaagaatggcctgttcggaaacctgattgc
cctgagcctgggctgacccccaaacttcaagagcaacttcgacctggccgaggatgccaactgcagctgagcaaggacacctacga
cgacgacctggacaacctgctggcccagatcggcgaccagtagccgacctgtttctggccgccaagaacctgtccgacgccatcct
gctgagcgacatcctgagagtgaacaccgagatcaccaaggccccctgagcgctctatgatcaagagatacagcagcaccacca
ggacctgacctgctgaaagctctcgtgcggcagcagctgcctgagaagtagcaagagattttcttcgaccagagcaagaacggcta
cgccggctacattgacggcgagccagccaggaagattctacaagttcatcaagcccatcctggaaaagatggacggcaccgagga
actgctcgtgaagctgaacagagaggacctgctgcggaagcagcggaccttcgacaacggcagcatccccaccagatccacctggg
agagctgcacgccattctgcggcgaggaagatttttaccatttctgaaggacaaccgggaaaagatcgagaagatcctgacctt
ccgcatcccctactacgtgggccctctggccaggggaaacagcagattcgctggatgaccagaaagagcgaggaaaccatcacccc
ctggaacttcgaggaagtggtggacaaggcgcttccgccagagcttcatcgagcggatgaccaacttcgataagaacctgccc
cgagaaggtgctgcccagcagcctgctgtacgagtacttcacctgtataacgagctgaccaaaagtgaatacgtgaccgaggg
aatgagaaagcccgccttctgagcggcgagcagaaaaaggccatcgtggacctgctgttcaagaccaaccggaaagtgacctgaa
gcagctgaaaaggactacttcaagaaaatcgagtgttcgactccgtgaaaatctccggcgtggaagatcggttcaacgcctccct
gggcacataccagatctgctgaaaattatcaaggacaaggacttcttgacaatgaggaaaacgaggacattctggaagatatcgt
gctgacctgacactgtttgaggacagagagatgatcgaggaacggctgaaaacctatgccacctgttcgacgacaaaagtgatgaa
gcagctgaagcggcgagatacaccggctggggcaggtgagccggaagctgatcaacggcatccgggacaagcagtcgggcaagac
aatcctggatttctgaaagtcgacggcttcgccaacagaaacttcatgcagctgatccacgacgacagcctgaccttaagagga
catccagaaaagccaggtgtccggccaggcgatagcctgcacgagcatttgccaatctggccggcagccccgccattagaaggg
catcctgcagacagtgaaagtggtggacgagctcgtgaaagtgatgggcccgcacaaagcccgagaacatcgtgatcgaatggccag
agagaaccagaccaccagaagggacagaagaacagccgcgagagaatgaagcggatcgaagagggcataaagagctgggcagcca
gatcctgaaagaacaccccgctggaaaacacccagctgcagaacgagaagctgtacctgtactacctgcagaatggcggggatatgta
cgtggaccaggaactggacatcaaccggctgtccgactacgatgtggaccatatcgtgcctcagagctttctgaaggacgactccat
cgacaacaaggtgctgaccagaagcgacaagaaccggggcaagagcgacaacgtgccctccgaagaggtcgtgaagaagatgaagaa
ctactggcggcagctgctgaacgcaagctgattaccagagaaagttcgacaatctgaccaaggccgagagaggcgccctgagcga
actggataagggcggttcatcaagagacagctggtggaaaccggcgagatcacaagcagctggcacagatcctggactccggat
gaacactaagtacgacgagaatgacaagctgatccgggaagtgaagtgatcacctgaagtccaagctggtgtccgatttccgaa

基因修饰细胞（敲除、敲入、点突变） 基础实验服务（动物实验、载体构建）

病毒包装（慢病毒、非整合慢病毒、腺病毒、腺相关病毒、病毒样颗粒蛋白、脂质体纳米颗粒）

试剂（常规试剂、感受态、基因敲除敲入点突变试剂盒、滴度检测试剂盒）



ggatttccagttttacaaagtgcgcgagatcaacaactaccaccacgcccacgacgcctacctgaacgccgtcgtgggaaccgccct
gatcaaaaagtaccctaagctggaaagcgagttcgtgtacggcgactacaagggtgtacgacgtgcggaagatgatcgccaagagcga
gcaggaatcggaaggtaccgccaagtacttctctacagcaacatcatgaactttttcaagaccgagattacctggccaacgg
cgagatccggaagcgccctctgatcgagacaaacggcgaaaccggggagatcgtgtgggataaaggccgggattttgccaccgtgcg
gaaagtgctgagcatgccccaaagtgaatatcgtgaaaaagaccgaggtgcagacagggcggttcagcaaagagtcctatcctgccccaa
gaggaacagcgataagctgatcgccagaaagaaggactgggaccctaagaagtacggcggttcgacagccccaccgtggcctattc
tgtgctggtgggtggccaaagtggaaaagggaagtccaagaaactgaagagtgtgaaagagctgctggggatcacatcatggaag
aagcagcttcgagaagaatcccatcgactttctggaagccaagggtacaaagaagtgaagaaaggacctgatcatcaagctgcctaa
gtactccctgttcgagctggaagacggccggaagagaatgctggcctctgcggcggaactgcagaagggaacgaactggccctgcc
ctccaaatatgtgaacttctgtacctggccagccactatgagaagctgaagggtcccccgaggataatgagcagaacacagctgtt
tgtggaacagcacaagcactacctggacgagatcatcgagcagatcagcgagttctccaagagagtgatcctggccgacgctaact
ggacaaagtgtgtccgcctacaacaagcaccgggataagcccatcagagagcaggccgagaatatcatccacctgtttacctgac
caatctgggagccccctgccgcttcaagtactttgacaccaccatcgaccggaagaggtacaccagcaccaaagaggtgctggacgc
caccctgatccaccagagcatcaccggcctgtacgagacacggatcgacctgtctcagctgggaggcgacaagcgacctgccgccac
aaagaaggctggacaggctaagaagaagaagattacaagacgatgacgataagggatcccagaggaagtcttctaacatgcggtg
acgtggaggagaatccccggccctATGGCCAAGCCTTTGTCTCAAGAAGAATCCACCCTCATTGAAAGAGCAACGGCTACAATCAACA
GCATCCCCATCTCTGAAGACTACAGCGTCGCCAGCGCAGCTCTCTTAGCGACGGCCGCATCTTCACTGGTGTCAATGTATATCATT
TTACTGGGGGACCTTGTGCAGAACTCGTGGTGTCTGGGCACTGCTGCTGCTGCGGCAGCTGGCAACCTGACTTGTATCGTCGCGATCG
GAAATGAGAACAGGGGCATCTTGAGCCCCTGCGGACGGTGCCGACAGGTGCTTCTCGATCTGCATCCTGGGATCAAAGCCATAGTGA
AGGACAGTGATGGACAGCCGACGGCAGTTGGGATTCGTGAATTGCTGCCCTCTGGTTATGTGTGGGAGGGCTAAgtttaaacccgct
gatcagcctcgactgtgccttctagttgccagccatctgttgtttgccccctccccctgccttccctgacctggaaggtgccactc
ccactgtccttttccataataaaatgaggaaattgcatcgcatgtgtctgagtaggtgtcattctattcttgggggggtgggggtggggcagg
acagcaagggggaggattgggaagacaatagcaggcatgctggggatgcggtgggctctatggcttctgaggcggaagaaccagct
ggggctctagggggtatccccacgcgccctgtagcggcgcatgaagcgcggcggtgtggtggttacgcgcagcgtgaccgctacac
ttgccagcgccctagcgcccgtcctttcgcttttctcccttcccttctcgccacgttcgccggctttccccgtcaagctctaaatc
gggggtctccctttagggttccgatttagtgctttacggcacctcgacccccaaaaaacttgattagggtgatggttcacgtagtgggc
catcgccctgatagacggtttttcgccctttgacgttggagtccacgttctttaatagtggaactcttgttccaaactggaacaacac
tcaacctatctcggtctattcttttgatttataagggttttgcgatttcggcctattggttaaaaaatgagctgatttaacaaa
aatttaacgcgaattaattctgtggaatgtgtgtcagttagggtgtggaagtcctccaggtccccagcgaggcagaagtatgcaaag
catgcatctcaattagtcagcaaccaggtgtggaagtcctccaggtccccagcgaggcagaagtatgcaaagcatgcatctcaatta
gtcagcaaccatagtcctcgccccctaaactccgccccatcccgccccctaaactccgccccagttccgccccattctccgccccatggctgact
aattttttttatttatgcagaggccgaggccgcctctgcctctgagctattccagaagtagtgaggaggcttttttggaggccctagg
cttttgcaaaaagctccccgggagcttgatatccattttcggtatctgatcagcacgtgttgacaattaatcatcggcgatagtatc
ggcatagtataatacagacaaggtgaggaactaaacctggccaagttgaccagtgccgttccggtgctcaccgcgcgcgacgtcgcc
ggagcggctcagttctggaccgaccggctcgggttctccccgggacttcgtggaggacgacttcgccggtgtggtccgggacgacgtg
accctgttcatcagcgcggtccaggaccaggtggtgcgggacaacacctggcctgggtgtgggtgcgcggcctggacgagctgtac
gccgagtggtcggaggtcgtgtccacgaacttcggggacgcctccgggcccggccatgaccgagatcgggcgagcagccgtggggggcg
gagttcgccctgcgcgaccggcgccggaactgcgtgcacttcgtggccgaggagcaggactgacacgtgctacgagatttcgattcc
accgccgccttctatgaaaggttgggcttcggaatcgttttcgggacgccggttgatgatctccagcgcggggatctcatgctg
gagttcttcgccaccccaacttgtttattgcagcttataatggtttacaaataaagcaatagcatcacaatttcacaaataaagca
tttttttcaactgcattctagttgtggtttgtccaaactcatcaatgtatcttatcatgtctgtataccgtcgacctctagctagagc

基因修饰细胞（敲除、敲入、点突变） 基础实验服务（动物实验、载体构建）

病毒包装（慢病毒、非整合慢病毒、腺病毒、腺相关病毒、病毒样颗粒蛋白、脂质体纳米颗粒）

试剂（常规试剂、感受态、基因敲除敲入点突变试剂盒、滴度检测试剂盒）



ttggcgtaatcatggtcatagctgtttcctgtgtgaaattgttatccgctcacaaattccacacaacatacagccggaagcataaag
tgtaaagcctggggtgcctaataatgagttagctaacacattaatgtcggttcgctcactgcccgtttccagtcgggaaacctgtcg
tgccagctgcattaatgaatcgccaacgcgcggggagaggcggtttgcgtattggcgctcttccgcttctcgtcactgactcg
ctgcgctcggtcgttcggctgcggcgagcggtatcagctcactcaaaggcggtataacggttatccacagaatcaggggataacgca
ggaaagaacatgtgagcaaaaggccagcaaaaggccaggaaccgtaaaaaggccgcgttgctggcggttttccataggctccgcccc
cctgacgagcatcacaaaaatcgacgtcaagtcagaggtggcgaaacccgacaggactataaagataaccaggcgtttccccctgga
agctccctcgtgcgctctcctgttccgaccctgccgcttaccggatacctgtccgcctttctcccttcgggaagcgtggcgctttct
catagctcacgctgtaggtatctcagttcgggtgtaggtcggttcgctccaagctgggctgtgtgcacgaacccccgttcagccgac
cgctgcgccttatccggtaactatcgtcttgagtccaacccggtaagacacgacttatcgccactggcagcagccactggtaacagg
attagcagagcgaggtatgtaggcggtgtacagagttcttgaagtgggtggcctaactacggctacactagaagaacagtatttgggt
atctgcgctctgtgaagccagttaccttcggaaaaagagttggtagctcttgatccggcaacaaaccaccgctggtagcggtgggt
ttttttgtttgcaagcagcagattacgcgcagaaaaaaaggatctcaagaagatcctttgatcttttctacggggtctgacgctcag
tggaacgaaaactcacgttaagggaattttgggtcatgagattatcaaaaaggatcttcacctagatccttttaattaaaaatgaagt
tttaaatcaatctaaagtatatatgagtaaaccttggtctgacagttaccaatgcttaatcagtgaggcacctatctcagcgatctgt
ctatttcgttcatccatagttgcctgactccccgtcgtgtagataactacgatacgggagggcttaccatctggccccagtgtgca
atgataccgcgagacccacgctcaccggctccagatttatcagcaataaaccagccagccggaaggggcgagcgcagaagtggctct
gcaactttatccgcctccatccagctctattaattgttgcgggaagctagagtaagtagttcgccagttaatagtttgcgaacggt
gttgccattgctacaggaatcgtggtgtcacgctcgtcttggtatggcttattcagctccggttcccaacgatcaaggcgagtt
acatgatcccccatgttgtgcaaaaaagcggttagctccttcggctcctccgatcgttgtcagaagtaagttggccgcagtggtatca
ctcatggttatggcagcactgcataattctcttactgtcatgccatccgtaagatgcttttctgtgactggtgagtactcaaccaag
tcattctgagaatagtgtatgcggcgaccgagttgctcttgcccggcgtaatacgggataataccgcgccacatagcagaacttta
aaagtgtcatcattggaaaacgttcttcggggcgaaaactctcaaggatcttaccgctgttgagatccagttcgatgtaaccact
cgtgcacccaactgatcttcagcatcttttactttcaccagcgtttctgggtgagcaaaaacaggaaggcaaaatgccgcaaaaaag
ggaataaggcgacacggaatgttgaatactcatactcttcttttcaatattattgaagcatttatcagggttattgtctcatg
agcgatacatatttgaatgtatttagaaaaataaacaatatagggttccgcgcacatttccccgaaaagtgccacctgacgtcgac
ggatcgggagatctcccgatccccatggtgcactctcagtacaatctgctctgatgccgatagtttaagccagtatctgctccctg
cttgtgtgttgagggtcgctgagtagtgccgcgagcaaaatttaagctacaacaaggcaaggcttgaccgacaattgcatgaagaatc
tgcttagggttaggcgttttgcgctgcttcgcgatgtacgggccagataacgcgttgacattgattattgactagtattaatagt
aatcaattacggggtcatttagttcatagcccatatatggagttccgcgttacataacttacggtaaatggccgcctggctgaccgc
ccaacgacccccgccattgacgtcaataatgacgtatgttcccatagtaacgccaatagggaactttccattgacgtcaatgggtgg
agtatttacggtaaacgtccacttggcagttacatcaagtgtatcatatgccaaagtacgccccctattgacgtcaatgacggtaaat
ggccgcctggcattatgccagttacatgaccttatgggactttcctacttggcagttacatctacgtattagtcacgtattacca
tgg



GENECARER 关注基恩科公众号获取更多资讯

- Website www.genecarer.com
- Service hotline 029-84613682

基因修饰细胞（敲除、敲入、点突变） 基础实验服务（动物实验、载体构建）

病毒包装（慢病毒、非整合慢病毒、腺病毒、腺相关病毒、病毒样颗粒蛋白、脂质体纳米颗粒）

试剂（常规试剂、感受态、基因敲除敲入点突变试剂盒、滴度检测试剂盒）