



pLVX-CMV-Thbs4-PGK-Puro质粒说明书

pLVX-CMV-Thbs4-PGK-Puro 是以基恩科生物自研慢病毒骨架载体 pLVX-CMV-MCS-PGK-Puro 为骨架载体构建，过表达小鼠 Thbs4 基因，与载体 PMD2.G 和 Pspax2 配套进行慢病毒包装。

【质粒信息】

产品货号	GC020400769		
产品规格	☒ 小提 (≥2μg)	☐ 中提 (≥35μg)	☐ 大提 (≥500μg)
基因名称	Thbs4		
基因别称	TSP4		
物 种	小鼠(house mouse)		
基因转录本	NM_011582.3		
基因全长	2892bp		
标签蛋白	无		
原核抗性	Amp		
真核抗性	Puro		
荧光标记	无		
高/低拷贝	高		
培养温度	37°C		
感受态	Stabl3		
CDS 序列	atgccggccccacgcgcggccgcggccttctctctgctgcacctggtcctgcagccgtggcagcgga cgagcgcggccagccacacccaggtctttgatcttctaccgtcctccagccagaggctgaaccccgagcgc ctgcagccagctcctgacagatccaccctgcacgaagtctatctcatctccaccttcaagctgcagagtaaaa gctcagccaccatcttggcctctactcctcaagtgacaacagcaaatacttgaattcactgtgatgggacg gctgaacaaagccatcctccgctacatgaagaatgatggaagatccatctggtggtgttcaacaacttgca gctggtgatgggaggcgccaggggtctctgagactgagcaattgcagagaggagatggctctgt agaactctactggactgcgctcaggcggactcgggtgcgaacctccccagagccttttggcctcaccca gaaccagagtcattgaattgcggacattccagaggaagccccaggacttcttgaagagctgaagctg gtggtgcggggctcgtgttccaggtggccagcctcaagactgcttctgcagcagagtgcctctgg ctgcacaagcacaggagactttaatcgacagtttctgggtcaaatgacacaactgaaccagctccttggga gaggtgaaagatcttctgaggcagcaggtcaaggaaacatggttttgcgaaacaccattgctgaatgcca agcttggtgctctcagcttccagtcctcaacacactgggtcccatagctctccagcaccctccaa ctgcaccaacacgcactgtgactccagcctgtttccgaggtgtccgatgtacggacaccagggatggc ttcagtggtgacctgcccagatggttacagggaacgggatcacctgctgtgacgtggatgagtgca aataccatccctgtatccaggtgtgcgctgtgtgaattggctccgggttcagatgtgacgcctgtccagt aggtttcacaggggccatggtgcaggggtgcgggatcaacttgcataaacaacaagcaggtgtgcact		

[基因修饰细胞（敲除、敲入、点突变）](#) [基础实验服务（动物实验、载体构建）](#)

[病毒包装（慢病毒、非整合慢病毒、腺病毒、腺相关病毒、病毒样颗粒蛋白、脂质体纳米颗粒）](#)

[试剂（常规试剂、感受态、基因敲除敲入点突变试剂盒、滴度检测试剂盒）](#)




	gatgttgatgagtgtcagaatggagcgtgtgttctgaattctatctgcattaacactttgggatcttatcgctg tgggccttgcaaaccagggtagactggtgatcagacgaggggatgcaagactgaaaggagctgccgga accagagcagaacctatgcagtgtcatgcgcagtgacattgaggagcggcaaggggatgtgacgtgt gtgtgtggtgttgctgggctggtgacggctatgtctgtggaaggatgtggacattgacagttaccctga tgaagaactgcatgctctgccaggaactgcaagaaggataactgcaagatgtgcaaaactctggccag gaagatgcagacagagatggcatcggagacgcgtgtgatgaggatgcagatggagatgggatcttgaa tgacaggacaactgtgtcctgactcacaatatagaccaaaggaaacagtataaagatatctttggggatg cctgtgacaactgccggatggtcctgaataatgaccagaaggatactgacggggatgggagaggagac gcctgtgatgacgacatggatggagatggaataaaaaacattttggacaactgtcccagagtccaaccg tgaccagcaggatcgggatggtgatgatgtcggagatgctgtgacagctgtcctgatgtcagtaacccta accagtcggatgtggataacgatctggtgggactcctgtgacaccaaccaagacagtgcaggggatg gccaccaggacagcacagacaactgcccacagtcattaacagctcccagctggacactgacaaagatgg gatcggcgatgaatgtgatgacgatgacgataacgatggcatcccagacctggtgcctcctggccagac aactgcaggctcgtcccaaccagcccaggaagatagcaacaatgacgggtaggagatatctgtgaa gctgacttcgaccaggaccaggtcatcgatcacattgatgtgtgacctgagaatgcggagatcacctgac tgacttcagggcctaccagacagtggctcctggaccctgaaggggatgtcagatcgacccaactgggtg gtcctgaaccagggcctggaattgtgacagaccatgaacagtgcacctgacctagctgttggttacacgg catttaacggagttgactttgaaggaccttcacgtaaaacaccagacagatgatgactatgctggctttat tttggttaccagacagctccagcttctatgtatcatgtggaagcaaaggagcagacatactggcagg ctacaccgttccgtgcagtagcagaacctggtattcagctcaaggctgtgaagtctaaaactggccaggg gaacatctccgaaactcctgtggcacacaggggacaccagcgaccaggtcaggctgctgtggaaggac tccaggaatgtgggctggaaggacaaggctcctaccgctggttctgacataggccccaggtgggct acatcagggctgcctttatgaaggctcggagttggtggctgactctggggtcccatagacaccacatg cgtggaggccgacttggtgtgttctgtcttcaagaaaacatcatctggtccaacctcaagtaccgctgca acgacaccataccagaggacttcaggagttccagaccagagtttcgaccgcttgataattga
--	--

【质粒图谱】

[基因修饰细胞（敲除、敲入、点突变）](#) [基础实验服务（动物实验、载体构建）](#)

[病毒包装（慢病毒、非整合慢病毒、腺病毒、腺相关病毒、病毒样颗粒蛋白、脂质体纳米颗粒）](#)

[试剂（常规试剂、感受态、基因敲除敲入点突变试剂盒、滴度检测试剂盒）](#)

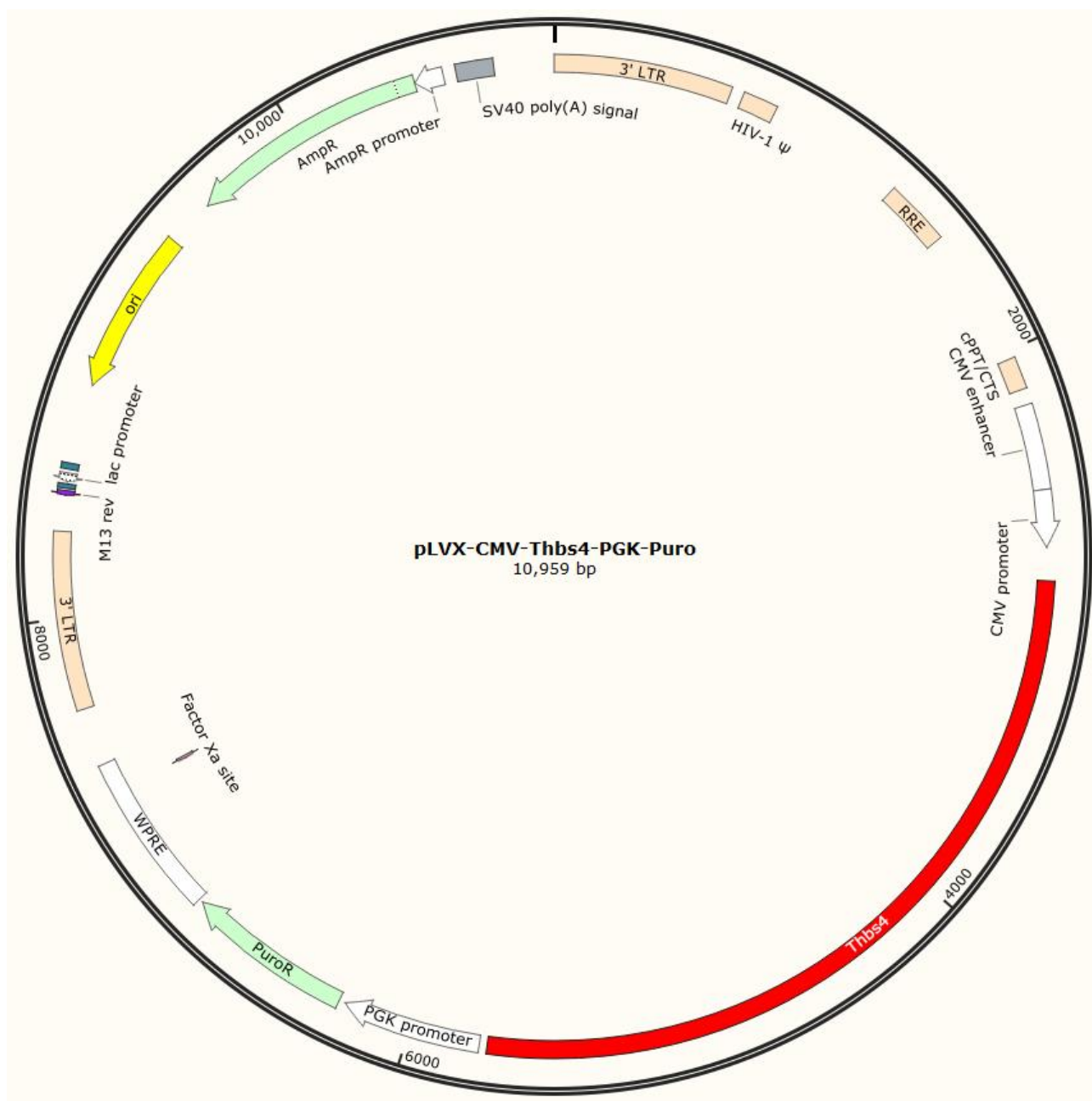

【保存与扩增】

1. 保存：质粒置于-20℃保存，穿刺菌置于4℃保存
2. 质粒扩增：收到质粒后离心，-80℃取出感受态细胞，取1uL质粒加至100ul感受态中，冰浴30min；42℃热击90s，再冰浴2min，混合液体直接涂板，倒置培养12-16h，挑单克隆至液体培养基中，震荡12-16h，提取质粒。

[基因修饰细胞（敲除、敲入、点突变）](#) [基础实验服务（动物实验、载体构建）](#)

[病毒包装（慢病毒、非整合慢病毒、腺病毒、腺相关病毒、病毒样颗粒蛋白、脂质体纳米颗粒）](#)

[试剂（常规试剂、感受态、基因敲除敲入点突变试剂盒、滴度检测试剂盒）](#)



3. 菌液扩增：经划线培养后挑克隆至相应抗性 LB 培养基中。

【注意事项】

- 本质粒未经基恩科（Genecare）生物书面许可不得用于任何商业用途，也不得移交给订货人所在实验室外的任何个人或单位。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

【使用说明】

首次使用 2μg 包装的本产品时，请先取少量本质粒转化大肠杆菌，进行质粒小量、中量或大量抽提后再用于后续用途。
抽提获得的质粒可以通过酶切电泳进行鉴定，或通过测序进行鉴定。



- 扫码关注基恩科公众号获取更多资讯
- Website www.genecarer.com
- Service hotline 029-84613682

[基因修饰细胞（敲除、敲入、点突变）](#) [基础实验服务（动物实验、载体构建）](#)

[病毒包装（慢病毒、非整合慢病毒、腺病毒、腺相关病毒、病毒样颗粒蛋白、脂质体纳米颗粒）](#)

[试剂（常规试剂、感受态、基因敲除敲入点突变试剂盒、滴度检测试剂盒）](#)